



## ハートサイン

生活習慣病・循環器病管理アプリ

はじめてお使いになる方へ  
— このアプリを使う前の準備 — (iOS版)

2026/03/09 ver.

アプリの操作など、技術的なお問い合わせは本アプリから  
研究や医療に関する専門的な内容に関しましてはメールでお問い合わせができます

アプリからの問い合わせ	メールでの問い合わせ
メニュー → ヘルプ → お問い合わせ	メールアドレス: <a href="mailto:heartsign@med.mie-u.ac.jp">heartsign@med.mie-u.ac.jp</a>

### ハートサイン動作環境

iOS 14以降

※ iPhone 6s / iPhone SE (初代) であれば iOS 14 以降にアップデート可能です

※ iPhone 6 Plus 以前の機種は iOS 14 にアップデートできませんので

対象外となります

※ご利用のOSバージョンによって一部表示が異なることがあります

# 目次

インストール	
インストール	3
通知の許可	3
ログイン	
ログイン	4
本人確認情報の登録（メールアドレスで登録）	5
本人確認情報の登録（メールアドレスなしで使用）	6
基本情報登録	
基本情報登録	7
アンケート	
アンケート	14
位置情報の許可	14
ヘルスケア連携	
ヘルスケア連携	15
臨床研究参加の登録	
臨床研究参加の登録 （臨床研究に参加されている方のみ）	16

※アプリの使用には医師から発行されるIDとパスワードが必要です


以下のQRコードを読み取る方法のほか、App Storeで「ハートサイン」と検索することでもアプリをインストールいただけます

すでにTestFlight経由でハートサインアプリをインストール済みの方は、AppStoreから再インストールすることでアプリの上書きをしてください  
 これまでのデータが引き継がれ、継続してアプリをご利用いただけます

- 1 スマートフォンのカメラを起動し、右記のQRコードを読み込みます



- 2 App Storeでハートサインアプリが表示されたら、「入手」をタップします

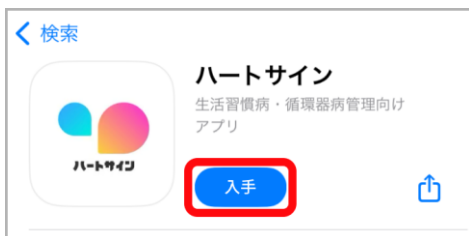


- 3 インストールの際、本人確認のために指紋認証・顔認証・もしくはサインインが求められます  
 サインインにはご自身のApple IDとパスワードを入力してください


※認証情報がわからない場合、パスワードを再設定する必要があります

Apple IDのパスワード再設定は、iPhone端末の「設定」>「パスワードとセキュリティ」>「パスワードの変更」の順にタップし、画面の案内に従ってください

※メールが届かない場合には、迷惑メールフォルダをご確認するか、メールアドレスが正しいかご確認ください

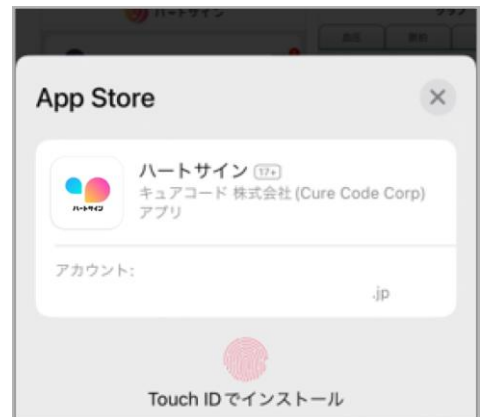

- 4 「開く」をタップします

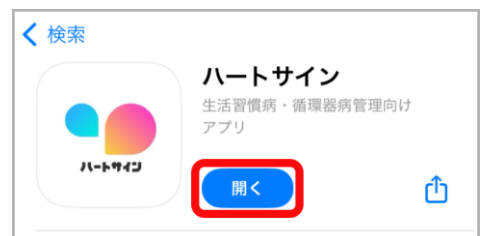

- 5 通知許可のメッセージが表示された場合は、「許可」をタップします




## 6 「はじめる」をタップします



## 8 医療機関から受け取ったログイン名 (ID) とパスワードを入力し、「ログイン」をタップします



## 7 下へスクロールして利用規約全文を確認し、同意する場合「利用規約に同意する」をタップします

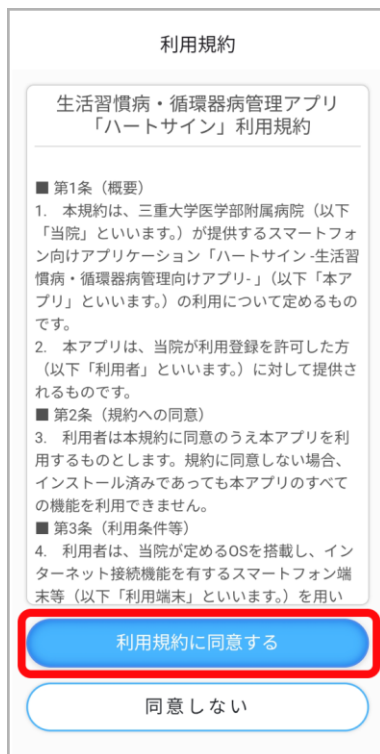


- 9** メールアドレスをお持ちの場合は、「メールアドレスで登録」をタップします  
 お持ちでない方は、「13」へお進みください

- 10** メールアドレスを入力し、「確認メールを送信」をタップします

## ご注意ください

- ※メールアドレスを登録しておく、パスワードを忘れた際に、再設定をすることができます
- ※アプリを使用するスマートフォンで受信可能なメールアドレスを推奨します
- ※「noreply@heart-sign.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いします

- 11** メールアプリを起動します

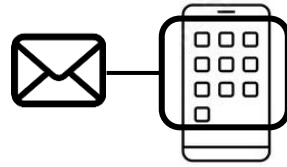

- 12** メールアプリで受信ボックスを確認し、先ほど入力したメールアドレスに届いた**6ケタの認証コード**を確認します

再度、ハートサインアプリに戻って**6ケタの認証コード**を入力し、「認証する」をタップします

- ※メールが届かない場合は迷惑メールフォルダをご確認ください
- また、メールアドレスが正しいか再度ご確認ください

続いて、「14」へお進みください

**13** メールアドレスをお持ちでない方は、「メールアドレスなしで使用する」をタップします



なお、パスワードを忘れた場合、メールアドレスを登録しておく、パスワードの再設定が可能になります

「メールアドレスなしで使用する」を選択した場合でも、あとで、メールアドレスを登録することができます

【メールアドレスを後で登録する方法】



トップページの左下の「メニュー」をタップ



メニュー一覧にある「ユーザー情報」をタップ



「メールアドレス」の右側にある編集マーク(鉛筆マーク)をタップ



その後、前ページの10~12の順で操作し、メールアドレスの「変更確定」(登録)を完了いただけます

続いて、「14」へお進みください



ハートサインWEBサイトの「よくある質問」でも手順をご紹介します

困ったときは左のQRコードを読みとってご参照ください

**14** ※本画面は、すべての方に表示されるものではありません。表示されない場合は「17」へお進みください

所属キーを入力します  
お持ちの方は「+さらに所属キーを追加する」をタップします  
お持ちでない方は、「16」へお進みください




**15** 6桁の所属キーを入力してください  
所属キーを複数お持ちの方は、「+さらに所属キーを追加する」をタップし、入力してください




**16** 「次へ」をタップしてください




**17** 該当するあなたの状態にチェックし、「次へ」をタップします

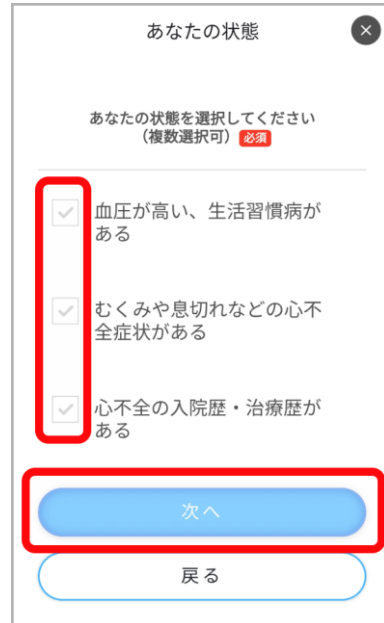

**18** 確認画面が表示されるので、正しい場合は「OK」をタップします  
間違っている場合は「キャンセル」をタップし「17」へ戻ります

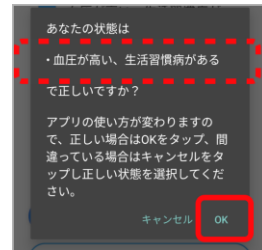


**19** 郵便番号を入力します  
都道府県名・市区町村名が表示されたら、「次へ」をタップします

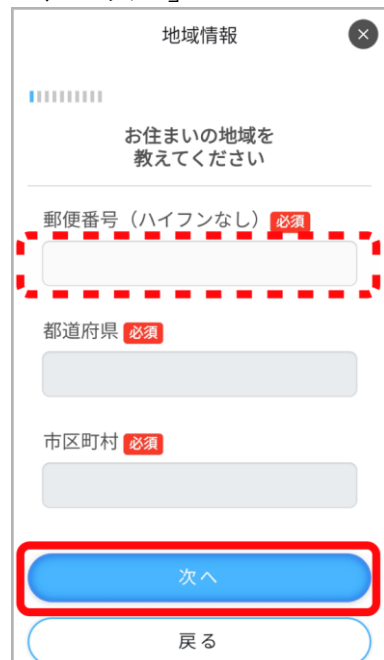

20 アプリに情報登録する方法を選択します  
 手入力を選択した場合は、「29」へお進みください  
 マイナポータルからの読み込みを選択した場合は、マイナンバーカードをお手元に準備し、「21」へお進みください




21 確認画面が表示されるので、内容を確認し「OK」をタップします

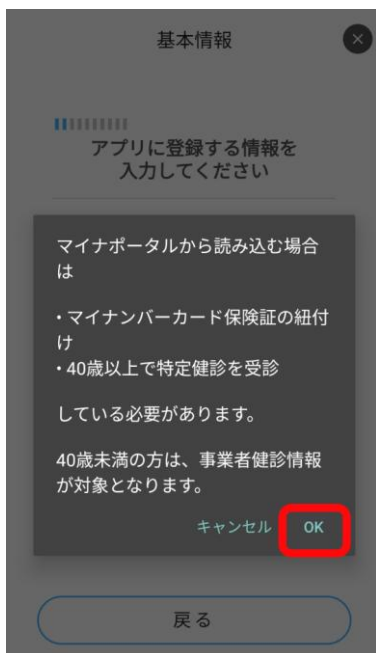


22 「取得する」をタップします



23 「OK」をタップします

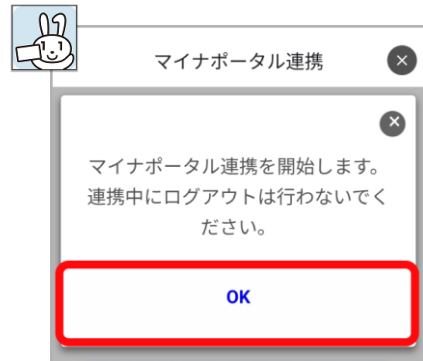

24 「利用規約に同意する」にチェックを入れ、「本人確認をはじめる」をタップします

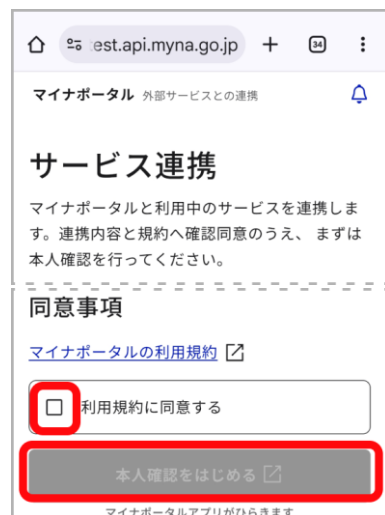

25 マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワードを入力し、「本人確認する」をタップします



26 マイナンバーカードスマートフォンの後ろにかざします



27 「連携」をタップします



28 自動で画面が切り替わります  
切り替わらない場合は「スキップ」をタップします



29 マイナポータルからデータ取得した場合は、内容を確認して、「次へ」をタップします  
 手入力の場合は、性別と生年月日を選択し、「次へ」をタップします

基本情報

アプリに登録する  
基本情報を入力してください

性別 **必須**

男性 女性 未回答

生年月日 **必須**

和暦 西暦

昭和35 年

月 日

次へ

戻る

31 基礎疾患の該当項目にチェックを入れ、「次へ」をタップします

基礎疾患

主な基礎疾患を教えてください

当てはまる項目にチェックを入れてください

**必須**

脳血管障害

心血管疾患

心房細動

運動器疾患  
膝・股関節の変形関節症、変形  
脊椎症、手指の変形性関節症

該当なし

次へ

戻る

30 生活習慣の該当項目にチェックを入れ、「次へ」をタップします

生活習慣

あなたの生活習慣を教えてください

タバコ（電子タバコ）は吸いますか？

一度も吸ったことがない

喫煙していたが、1か月以上禁煙している

現在喫煙中である

1日で吸っている本数 0

週に数回する

月に数回する

運動していない

次へ

戻る

32 ※本画面は、すべての方に表示されるものではありません。表示されない場合は「33」へお進みください

服薬状況を選択し、「次へ」をタップします

服薬状況

服薬状況を教えてください

現在、医師から処方された薬を服用していますか？ **必須**

服用していない

降圧薬（血圧を下げる薬）

抗血栓薬（血液をさらさらにする薬）

次へ

**33** ※本画面は、すべての方に表示されるものではありません。表示されない場合は「36」へお進みください


医師の指示のもと、維持する目安の体重を入力します  
 プラスボタンとマイナスボタンで微調整が可能です  
 入力後、「次へ」をタップします



**34** 医師の指示のもと、1日の目安の飲水量を入力し、「次へ」をタップします  
 飲水量の目安がない場合や、わからない場合は、該当するボタンをタップします



**35** 医師の指示のもと、運動目安心拍ゾーンを入力し、「次へ」をタップします

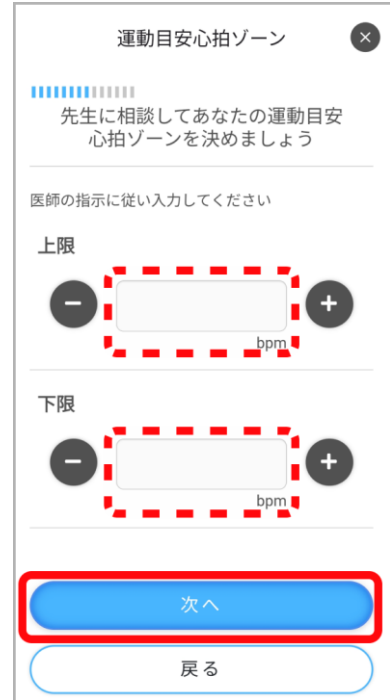

**36** 身長を入力します  
 身長を入力すると自動で歩幅が表示されます（ご自身で変更することもできます）  
 「次へ」をタップします



- 37** かかりつけ病院と担当医を入力し、「次へ」をタップします  
 ※2つの病院まで入力が可能です  
 ※かかりつけ医がない場合は、未入力で「次へ」をタップします

- 38** ※本画面は、すべての方に表示されるものではありません。表示されない場合は「39」へお進みください

入院状況を選択し、「次へ」をタップします

- 39** アラームの時刻を入力し、「次へ」をタップします  
 血圧・脈拍・体重の入力忘れ防止を通知する設定に使用します

- 40** アラームの時刻を入力し、「次へ」をタップします  
 お薬の飲み忘れ忘れ防止を通知する設定に使用します

**41** ※本画面は、すべての方に表示されるものではありません。表示されない場合は「42」へお進みください

ご自身のニックネームとご家族(3名まで)のメールアドレスなどを入力し、「次へ」をタップします  
登録しない場合は、「スキップ」をタップします

**42** 入力内容を確認し、「登録」をタップします

**43** 「利用開始」をタップします

## 44 青色のタイトルをタップします



## 45 アンケートに回答し、「送信」をタップします




## 46 右上の✕をタップします

47 「ハートサインに位置情報の使用を許可しますか?」という内容の画面が表示された場合は、「許可」をタップします  
※例画面の場合は、「アプリの使用時のみ」をタップします

## 48 基本情報登録、登録時のアンケート、位置情報へのアクセス許可が完了します




- 49 「48」に続いて、本画面が表示された場合は、「通信機器設定へ」をタップします  
本画面が表示されない場合は、メニュー→通信機器設定>ヘルスケア直下の「連携設定へ」の順にタップします

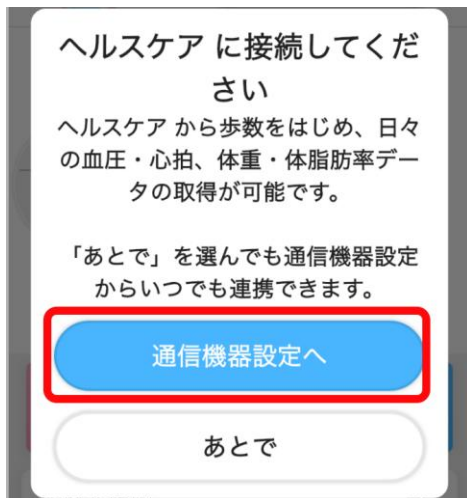


- 50 「連携設定へ」をタップします



- 51 「すべてオンにする」をタップします

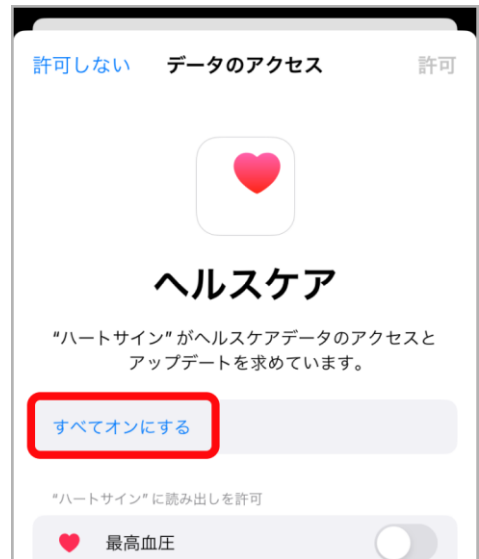

- 52 「許可」をタップします

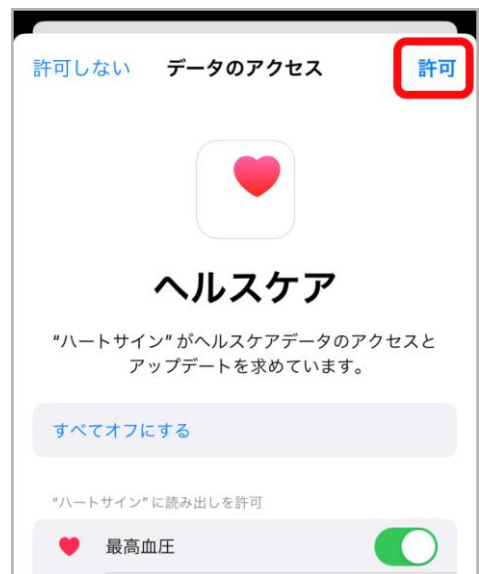

- 53 右上の×をタップし、ホーム画面に戻ります




臨床研究に参加されている方は、「54」へお進みください  
研究に参加されていない方は、以上でアプリをご利用いただくための準備は完了です

54 臨床研究に参加されている方のみ  
以下を設定します

「メニュー」をタップします



55 「ユーザー情報」をタップします

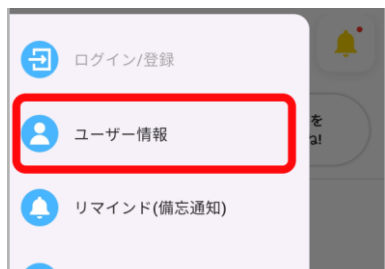

56 参加済みの臨床研究の「詳細」を  
タップします



57 灰色の部分をつまみます



58 「臨床研究参加期間」を入力し、  
「参加する」をタップします



59 右上の✕をタップし、ホーム画面に  
戻ります



以上で、アプリをご利用いただくための準備は完了です